

Une polyvalence et une facilité d'utilisation assurées

Avec la tronçonneuse AbrasiMet™ M, les laboratoires disposent d'une solution robuste dotée d'une interface utilisateur conviviale. Ses atouts - design compact, chambre de coupe maximisée et capot coulissant - en font un outil rapide, propre et simple, efficace pour tous les besoins de tronçonnage.

Informations de commande

Référence	Description
10-10107-200	AbrasiMet M (200V, 50/60Hz)
10-10107-200C	AbrasiMet M (200V, 50/60Hz) CSA
10-10107-400	AbrasiMet M (400V, 50/60Hz)
10-2166-200	Bac de recirculation pour AbrasiMet M (200 V, 50/60 Hz)
10-2166-400	Bac de recirculation pour AbrasiMet M (400 V, 50/60 Hz)
10-6010	Cool 3 (10L)
10-3545	Étau monobloc serrage rapide Droit
10-3544	Étau monobloc serrage rapide Gauche
10-3541	Étau à mors séparés Droit
10-3540	Étau à mors séparés Gauche
10-3531	Kit pour le bridage vertical
10-3532	Petites rehausses
10-3527	Kit de support en V et cales d'épaisseur



Spécifications techniques

	AbrasiMet M	
Fonctionnement	Manuel	
Puissance du moteur à 220 V CA	4 kW	
Alimentation principale triphasé, 50/60 Hz	400 V CA ou 200 V CA, Z-Achse	
Axe de mouvement du disque	Axe Z	
Largeur max. de l'échantillon	635 mm	304.8mm [12"]
Diamètres des disques de tronçonnage	254 mm	304,8 mm
Hauteur max. sous meule	172 mm	147 mm
Capacité de coupe	76,2 mm	102 mm
Vitesse du disque de tronçonnage	3.000 tr/min	2.600 tr/min

	AbrasiMet M
Éclairage	2 rampes à LED
Distances meules pour double coupe	1,52 mm-25,4 mm par incréments de 1,52 mm
Dimensions machine	Largeur : 791 mm Profondeur : 694 mm Hauteur : 653 mm avec capot fermé Hauteur : 919 mm avec capot ouvert
Dimensions de la table rainurée en T	250 mm x 180 mm (G) 250 mm x 115 mm (D)
Dispositifs de sécurité	Interrupteur de verrouillage du couvercle Arrêt d'urgence
Conformité aux normes	Directives CE



BUEHLER Worldwide Headquarters
North America-South America Offices
41 Waukegan Road
Lake Bluff, Illinois 60044-1699 USA
P: 800 BUEHLER (800-283-4537)
P: (847) 295-6500
www.buehler.com | info@buehler.com

European Headquarters
BUEHLER Germany
info.eu@buehler.com
BUEHLER France
info.eu@buehler.com
BUEHLER United Kingdom
info.eu@buehler.com

Asian Headquarters
BUEHLER China
info.cn@buehler.com
BUEHLER Japan
info.japan@buehler.com
BUEHLER Asia-Pacific
info.asia@buehler.com



AbrasiMet™ M

Tronçonneuse abrasive manuelle




Réglages optimisés

Sélectionnez facilement la vitesse optimale pour les meules abrasives de 254 mm et 305 mm pour maximiser leur efficacité



Chambre plus spacieuse

Un espace de coupe maximisé pour un bridage flexible et un positionnement aisé des échantillons

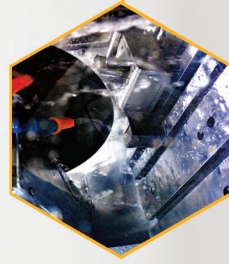

Nettoyage

Un commutateur externe permet de sélectionner aisément le refroidissement direct du disque ou le nettoyage avec un flexible orientable manuellement



Accès aisé à la chambre

Grâce à la conception coulissante du capot, l'accès à la chambre de coupe n'a jamais été aussi facile



Changez de disque en un clin d'œil

Un contre-écrou autoserrent facilite le changement de meule en évitant de devoir utiliser des outils



Coupe de tranche double meule

Un kit d'accessoires inclus permet deux coupes simultanées, divisant par deux la durée du tronçonnage



Robuste. Confortable. Fiable.



Un partenaire fort, des solutions fiables